


CuraSpon®

Hemostático absorbible de gelatina



- Hemostático fabricado en gelatina farmacéutica altamente purificada, pH neutro.
- Absorbe hasta 50 veces su peso y se fija con facilidad
- Absorción rápida y completa
- Muy recomendable para cirugía en cabeza y cuello
- Aplicable en cirugía endoscópica
- Sin reacciones alérgicas
- Disponible en formato de polvo para mezclar con suero y crear la propia gelatina
- Se puede cortar
- Antiadherente en el instrumental quirúrgico
- Presentación en doble envase estéril

Principio de actuación

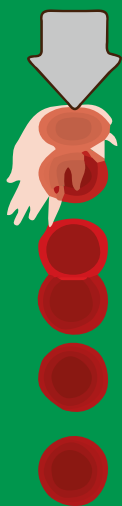

Curaspon® es una estructura porosa que activa los trombocitos en el momento en el cual la sangre entra en contacto con la matriz de gelatina purificada. En este proceso los trombocitos segregan una serie de sustancias químicas que promoven su agregación, al tiempo que su pared celular cambia, actuando así como agentes catalizadores en la formación de fibrina.

Aplicación y absorción

Presionando Curaspon® 2-4 minutos sobre la superficie, controlamos la hemorragia y se fija completamente a la superficie tisular

Puede ser aplicado en seco o humedecido con suero salino.

Licúa totalmente en 2-5 días en contacto con la mucosa

Se absorbe completamente en 3-4 semanas

Ref	Descripción	Dimensiones	Formato
CS-010	Estándar	80 x 50 x 10 mm	20 uds.
CS-110	Especial	80 x 50 x 1 mm	15 uds.
CS-210	Tampón	Ø 30 x 80 mm	15 uds.
CS-260	Pasta en polvo	1 gr.	4 uds.
CS-310	Cubo	10 x 10 x 10 mm	50 uds.

Ref	Descripción	Dimensiones	Formato
CS-330	Dental 60	10 x 10 x 10 mm	60 uds.
CS-420	Dial 2-2	20 x 20 x 10 mm	30 uds.
CS-452	Tampón nasal 5-2	50 x 10 x 10 mm	10 uds.
CS-610	Tall 100	125 x 80 x 10 mm	15 uds.
CS-950	Film	200 x 70 x 0,5 mm	15 uds.