

62 Electromedicina: Equipamiento Dental



B08836A

DETARTADOR COCOON CON ULTRASONIDO, MICROMOTOR Y ESPRAY EXTERNO

Limpiador de Ultrasonidos + Micromotor Cocoon con spray externo.

El módulo de ultrasonidos del Cocoon dispone de la tecnología piezoeléctrica de Satelec garantizando:

- **Rapidez:** la cavitación se alía a la eliminación mecánica de los depósitos de sarro.
- **Control óptimo del instrumento:** el módulo genera vibraciones lineales, de fácil control.
- **Potencia:** la frecuencia autorregulada de 27 a 32KHz y la retroalimentación (efecto "feed-back") confiere al Cocoon una potencia muy superior a la de los detartadores neumáticos.
- **Evolución:** dispone, probablemente, de la gama más amplia de insertos.

El módulo micromotor electrónico con spray externo o sin spray, le asegura:

- Velocidad autorregulada compatible con fresas diamantadas o de carburo de tungsteno: 40.000 r.p.m. en el eje del micromotor.
- En el caso del Cocoon Spray, enfriamiento por spray para evitar la necrosis de los tejidos y evacuar los residuos.
- El acople intramatic del micromotor es compatible con la mayoría de los instrumentos rotativos del mercado.
- El tallado de las cavidades, la preparación de las coronas, la colocación de pernos radiculares..., se puede ahora realizar sin riesgo, gracias a este equipo compacto.
- Además, podrá usar el micromotor para pequeños actos de cirugía ortopédica o para el pulido después del detartaje. Se pueden utilizar para eliminación de cálculos las sondas de urolitiasis de perro y gato.

Incluye:

- Consola de mando.
- Pieza de mano esterilizable.
- Soporte.
- 3 insertos N° 1, N° 2, N° 10P y llave.
- Micromotor de 40.000 r.p.m. con soporte.
- Pedal desconectable.
- Tubo para agua.
- Contra-ángulo 1:1.



B08835A


P5XS NEWTRON DETARTADOR DE ULTRASONIDOS

Tecnología Newtron, fácil de instalar, preciso y de vibraciones suaves e indoloras. Con irrigación independiente ofreciendo así una mayor portabilidad, potencia y precisión. Pieza de mano Newtron: no se calienta, esterilizable. Compatible con toda la gama de insertos Satelec. Con carcasa extremadamente resistente, reforzada con partículas de cristal. Frecuencia automática de 28 a 36 KHz. Con depósito independiente de gran capacidad, 300 ml. Se puede utilizar agua/ agua destilada o soluciones estériles, tales como clorhexidina. Control de potencia ergonómico, simple y preciso.

Incluye:

- Pieza de mano.
- 3 insertos para detartaje: n° 1, n° 2 y n° 10P.
- Llave para cambio de insertos.
- Pedal.

62 Electromedicina: Equipamiento Dental

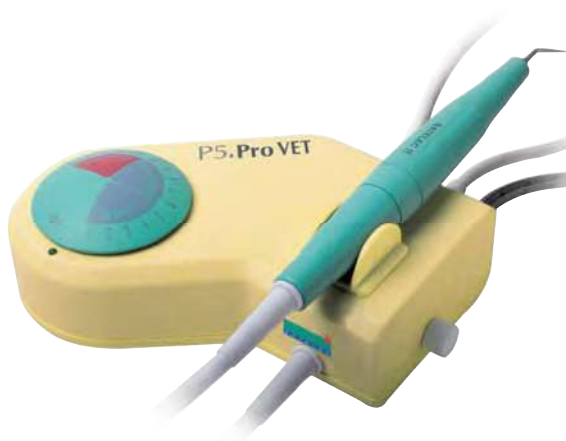

B08835

LIMPIADOR DE SARRO POR ULTRASONIDOS MODELO P5.PROVET

Es el generador de ultrasonidos más potente y compacto del mundo. Potencia de 27 a 32 KHZ. Con 4 escalas y 14 niveles de potencia que le garantizan una precisión absoluta. Pueden utilizarse todos los insertos de SATELEC: Limpieza de sarro, endodoncia, periodoncia, cirugía apical, fluidificación de cementos, etc. Para facilitar su funcionamiento independiente, se le puede adaptar un depósito de presión para agua B08838 (no incluido).

Incluye 3 insertos:

N 1: Con spray. Tratamientos de espacios interdetales, de cuello y subgingivales.

N 2: Con spray. Para el tratamiento de calculos importantes.

N 10P: Con spray. Tratamiento interproximal y de las bolsas periodontales.



B08827 N° 1



B08831 N° 2



B08832 N° 10P

Accesorios:


Reposición de insertos:

SONDAS PARA UROLITIASIS

Las sondas para urolitiasis se acoplan a todos los aparatos de ultrasonidos de la gama Satelec, conectándose de igual forma que los insertos para limpieza. Uso de la sonda para urolitiasis: 1-Esterilice la sonda 2 -Use el ultrasonido a potencia media. 3-Ponga el flujo del agua al máximo y en modo continuo. 4-Mueva la sonda hacia adelante y hacia

atrás para evitar un desarrollo de calor. 5-Cuando halla un cálculo solo, coloque la sonda en contacto con el cálculo para dividirlo. 6-Limpie la uretra proximal antes de seguir avanzando. • P5 Provet: ajuste la potencia 4-5

- Cocoon: ajuste la potencia 4-5 en posición detartaje
- P5 Newtron Xs: ajuste de potencia 2-3.

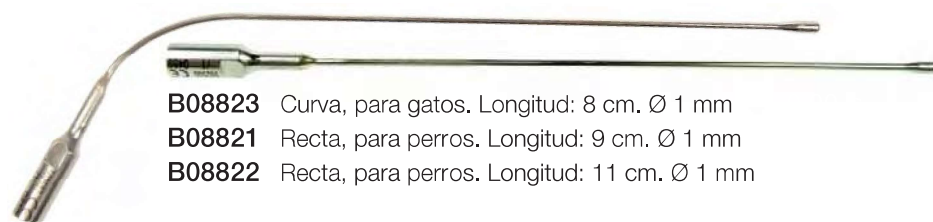

B08823 Curva, para gatos. Longitud: 8 cm. Ø 1 mm

B08821 Recta, para perros. Longitud: 9 cm. Ø 1 mm

B08822 Recta, para perros. Longitud: 11 cm. Ø 1 mm



B08837 CONTRA ÁNGULO

- Cambio de fresa mediante botón.
- Gran durabilidad. Elevado torque.
- Se lubrica sin necesidad de desarme.
- Excelente refrigeración mixta.
- Autoclavable a 135°C.

Características técnicas

- Para fresas de Contra-ángulo de 2,35 mm. e instrumentos radiculares. Transmisión 1:1
- Hasta 20.000 r.p.m. Montado sobre 4 rodamientos. Peso: 40 grs.



B08837A
Aceite lubricante para contra ángulo. 250ml.



B08838
BOMBA DEPÓSITO DE AGUA
Se adapta a la toma de agua del limpiador de ultrasonidos. Proporciona agua a presión con ayuda de una bomba manual, evitando así, tener que conectar el aparato a una cañería, lo que facilita su movilidad. Tanque de 2 litros.



B08842
TAZA PULIDORA (12 UDS)
Para utilización con contra-ángulo.



B08840
PASTA DE PULIDO DENTAL 200g
De aplicación directa. Se aferra y no hace proyecciones. Libre de ingredientes nocivos. De agradable sabor.