


CuraCel® Standard

Hemostático absorbible de celulosa regenerada oxidada



Sencillo
Seguro
Eficiente

- Hemostático de origen vegetal (celulosa proveniente de plantas), evita la posibilidad de exposición a contaminantes de origen animal o humano
- Idóneo para procedimientos endoscópicos
- Puede ser cortado sin que se deshilache
- Puede ser aplicado en cavidades (tras extirpar un tumor)
- Bactericida
- Gran flexibilidad

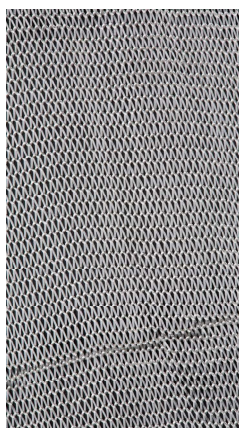

Principio de actuación

La gama **Curacel®** realiza la hemostasia debido a su bajo pH, provocando la desnaturalización de la albúmina y la globulina.

El gel saturado que forma ayuda a la formación del coágulo

Aplicación y absorción

Presionando CuraCel® Standard realiza la hemostasia en 3-4 minutos

Debe ser aplicado en seco, se puede colocar, sujetar o enrollar alrededor de una hemorragia.

Se absorbe completamente entre 7-14 días.



Rambla dels Països Catalans 12, L1 - 6E
08800 - Vilanova y la Geltrú
Barcelona
Telf. 938 576 677
pedidos.europa@atramat.com

Distribuidor exclusivo Curamedical

Ref.	Descripción	Dimensiones	Formato
CC-501	Curacel Standard Knit	12,5 x 50 mm	12 uds.
CC-507	Curacel Standard Knit	50 x 75 mm	12 uds.
CC-535	Curacel Standard Knit	50 x 350 mm	12 uds.
CC-537	Curacel Standard Knit	75 x 100 mm	12 uds.
CC-540	Curacel Standard Knit	100 x 200 mm	12 uds.