



Leishmaniosis Felina

Una enfermedad emergente
infradiagnosticada

Leishmaniosis Felina

Una enfermedad emergente infradiagnosticada

La leishmaniosis felina, causada por *Leishmania infantum*, ha dejado de ser una rareza clínica para convertirse en una patología de diagnóstico creciente.

Aunque la prevalencia suele ser inferior a la del perro, el gato debe considerarse un hospedador susceptible y un reservorio urbano competente, especialmente en zonas de alta presión vectorial, lo que aumenta el riesgo de transmisión a otros animales domésticos o humanos.

El conjunto de prevalencia felina en España se sitúa entre el 2-10% en zonas endémicas, dependiendo del método diagnóstico.*

Presentación clínica



Signos dermatológicos

Nódulos cutáneos en cabeza, pabellones auriculares y extremidades

Dermatitis ulcerativa y costrosa

Estomatitis y gingivitis crónica



Manifestaciones oculares

Uveítis anterior bilateral

Queratitis

Blefarokonjuntivitis



Afectaciones sistémicas

Linfadenomegalia generalizada

Emaciación progresiva

Letargia

Hallazgos laboratoriales característicos

- Hiperproteinemia con hiperglobulinemia policlonal
- Hipoalbuminemia
- Relación albúmina/globulinas <0,6 (marcador más sensible)
- Anemia no regenerativa leve
- Azotemia y proteinuria (si hay afectación renal)

*Bibliografía:

Pennisi MG et al. *Leishmaniosis of companion animals in Europe*. Vet Parasitol. 2015.
Maia C, Campino L. *Can domestic cats be considered reservoir hosts of Leishmania infantum?* Parasites & Vectors. 2011.
Miró G et al. *Leishmania infantum infection in cats from a non-endemic area*. Vet Parasitol. 2014.
Solano-Gallego L et al. *Feline leishmaniosis: diagnosis and management*. J Feline Med Surg. 2020.
Attipa C et al. *Feline leishmaniosis: An emerging disease*. Vet Parasitol. 2017.
Sherry K et al. *Serological and molecular detection of Leishmania in cats*. Parasitol Res. 2011

Nuevo Uranotest® exclusivo de Leishmania felina

¿Porqué un test exclusivo para gatos?

A diferencia de los perros, los gatos suelen ser asintomáticos actuando como reservorios que facilitan la transmisión indirecta a perros y humanos.

La detección de Leishmania en la especie felina constituye un desafío diagnóstico debido a la limitada respuesta humoral de los gatos, que se refleja en concentraciones reducidas de IgG circulante. Así mismo, los test rápidos disponibles en el mercado y fabricados con oro coloidal, presentan una sensibilidad diagnóstica insuficiente (47,4%), lo que limita su utilidad en esta especie.


Elipsis®

Advanced latex conjugation technology

Elipsis® (Advanced latex conjugation technology) Tecnología de segunda generación

Membrana hidrofílica y conjugado de látex único y exclusivo, elaborado con nuestras propias proteínas recombinantes.

El uso de látex carboxilado de 300nm en combinación con proteínas específicas, permite incrementar hasta el doble la sensibilidad respecto al oro coloidal (92,1%).

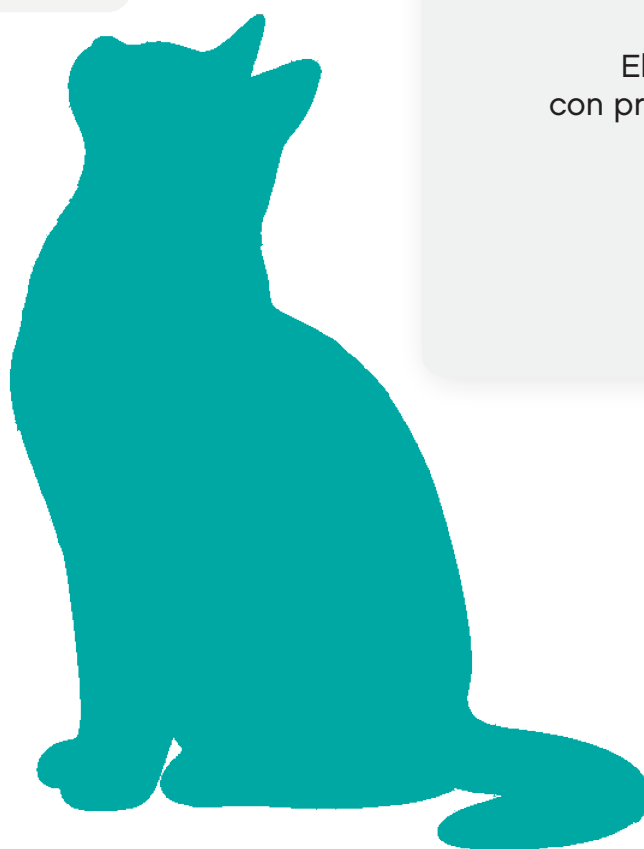

¿Por qué elegir Uranotest® Leishmania Felina

- Primer test diseñado específicamente para gatos
- Tecnología Elipsis® exclusiva
- Sensibilidad del 92,1 %
- Especificidad del 100 %
- Sin reacciones cruzadas
- Solo 10 µl de muestra
- Resultado en minutos



Urano® diagnostics
Avda. Santa Eulàlia, 2
08520 - Les Franqueses del Vallés
www.uranodiagnostics.com

MP0011 Catálogo Leishmaniosis felina


urano®
diagnostics